

NEONATOLOJİ
Aksesuarlar

microsite®
Küçük damarlar
için mikro-girişim
kiti

● Neonatal PICC'ler için Modifiye Seldinger Teknik (MST)

- Daha fazla doğru girişim olanağı sunar
- Zayıf periferik venöz erişimi kolaylaştırır⁽¹⁾
- Çoklu ponksiyon ve venöz travma riskini azaltır⁽²⁾
- Başarılı yerleştirme oranını artırır⁽²⁾

“ Bu modifiye Seldinger tekniği ile 2 Fr santral venöz kateterler güvenli bir şekilde periferik damarlara yerleştirilebilir.⁽³⁾ ”

● **microsite**: prematüre bebekler için tasarlanmış bir MST girişim kiti

Mikrosite, neonatal PICC'lerin girişini kolaylaştırır

- Venler küçük veya kötü durumda olduğunda
- Damarları görmek zorsa
- Yüksek venöz kollaps riski varsa

Mikrosite, venöz travmayı en aza indirir


- Mikro-girişim bölgesi için 24G iğne
- Atravmatik bükülme önleyici kılavuz tel
 - Pürüzsüz bir genişleme için konik uçlu soyulabilir kılıf

Mikrosite doğru ve başarılı bir girişimi garanti eder

- Delme iğnesinin şeffaf göbeği, kan geri dönüşünün anında görselleştirilmesine izin verir.
 - Kılavuz telin siyah işaret iğnenin uzunluğuna karşılık gelir.
- Siyah işaret geçildikten sonra kılavuz tel damarın içindedir.




● Gişim İğnesi - 19 mm / 24 G

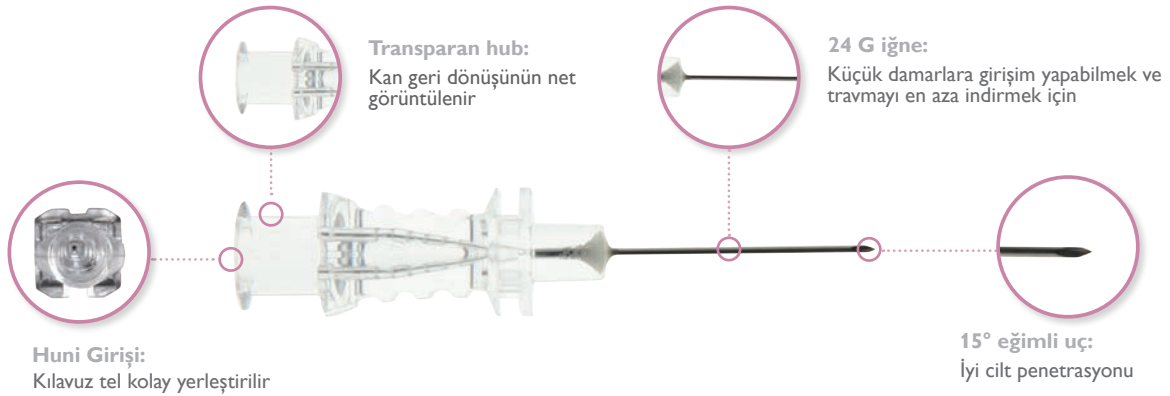

● Simetrik Nitinol kılavuz tel - 20 cm



● 1 Fr ve 2 Fr kateter için dilatör kılıf - 18 mm / 20 G

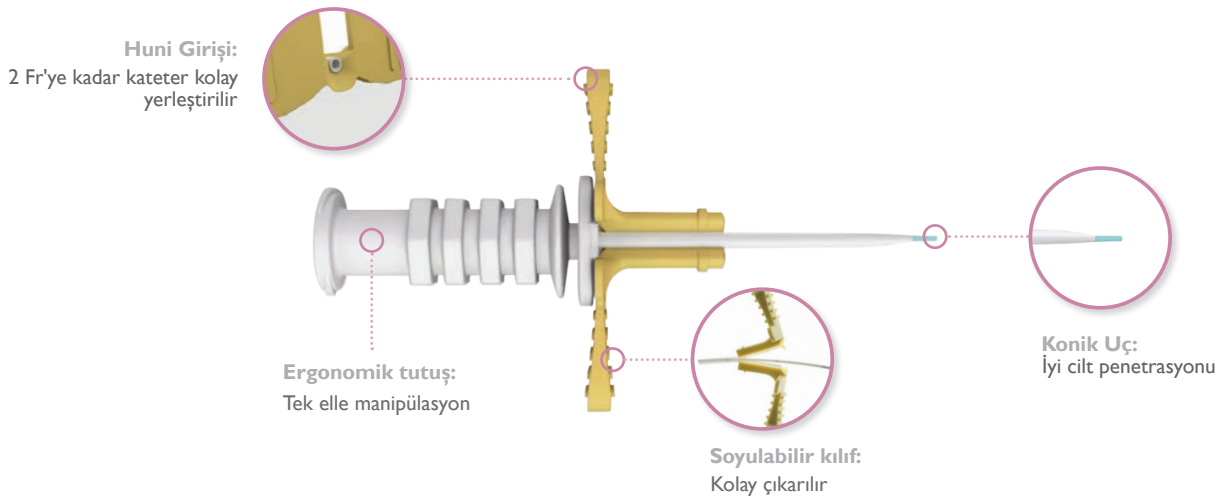

Prosedür



Tanımlama ve Kod	Boyut	İle Uyumlu	Miktar
microsite 1147.02	1 Fr ve 2 Fr kateterlerin girişimi	premicath epicutaneo cava epicutaneo2 nutriline nutriline twinflo	10/kutu

Referanslar

- (1) NANN. Peripherally Inserted Central Catheters: Guideline for Practice, 2nd Edition, 2007.
- (2) Petit J. Technological Advances for PICC Placement and Management. Adv Neonatal Care. 2007; 7 (3) : 122-31
- (3) Modified Seldinger Technique for 2-French peripherally inserted central venous catheters – Archives of Disease in Childhood 2008;93:ps368

Daha fazla bilgi için lütfen iletişime geçin: questions@vygon.com

Bu broşürde gösterilen özellikler sadece bilgi amaçlıdır ve hiçbir koşulda sözleşme niteliğinde değildir.

Vygon 5, rue Adeline 95440 ECOUEN FRANCE
Reception: +33 (0)1.39.92.63.63 Service clients France: +33 (0)1.39.92.63.81
Export customer service: +33 (0)1.39.92.64.15
Fax: +33 (0)1.39.92.64.44 www.vygon.com


www.vygon.com