



ONKOLOJİ
Katalog



Qimono
by VYGON

Yüksek güvenlikli bağlantı



Value Life

İlaçlar/çözeltiler için hazırlama cihazları

Torba

Marka adı	Kod	Ürün	Tanım	Endikasyon	Miktar kutu/koli
qimospike B	7218.01		QimoSpike B, Qimo Dişi ile donatılmış bir IV sıvı torbası erişim ucudur.	IV sıvı torbasına ilacın aspirasyonu veya ilacın/sıvının eklenmesi	50/600
qimospike B valf	7218.11		QimoSpike B valfi, Qimo Dişi ve geri dönüşsüz bir valf ile donatılmış bir IV sıvı torbası erişim ucudur	Sadece bir sıvı torbasından aspirasyon, böylece IV çözeltisinin yanlışlıkla kontaminasyonu önlenir	25/450

Şişe

Marka adı	Kod	Ürün	Tanım	Endikasyon	Miktar kutu/koli
qimocap ø14	7219.01 7219.010*		QimoCap, Qimo Dişi ile donatılmış bir şişe erişim kapağıdır. İlaç şişesi ile kalıcı bir bağlantı oluşturmak için özel olarak tasarlanmıştır.	Tamamen kapalı bir ortamda küçük miktarlarda ilaçların geri alınması ve sulandırılması.	50/900 4/72
qimocap ø20	7219.02 7219.020*				25/450 4/48
qimospike V	7217.04 7217.040*		QimoSpike V, Qimo Dişi ile donatılmış, şişeler için havalandırılmalı bir uçtur.	Her tip flakondan tekrarlanan geri çekme işlemleri.	25/300 4/48
qimoharpoon	7213.02		QimoHarpoon, basınç dengelemesini sağlayan, steril hava ile doldurulmuş 50 ml'lik bir balona bağlı bir hava giriş tüpüne sahip, kapalı sistem bir aktarma cihazıdır.	Yüksek riskli ilaçların geri çekilmesi ve yeniden yapılandırılması.	10/80
qimoharpoon S	7213.01				

* 25'li çoklu ambalaj

Şırınga/Uzatma hattı

Marka adı	Kod	Ürün	Tanım	Endikasyon	Miktar kutu/koli
qimo ♂	7210.91 7210.910*		Qimo Erkek dezenfekte edilebilir, kapalı, iğnesiz bir güvenlik konektörüdür. Erkek Luer-kilitler için emniyetli bir adaptördür. Takılı olduğunda, bağlantı kesilemez. Sadece Qimo Dişi'ye bağlanır.	Tüm erkek Luer-kilit bağlantı parçalarını sabitlemek için.	50/900 4/72
qimotransfer	7220.01		Dişi Luer-kilidine dişi Luer-kilit konektörüne, Qimo Dişi konektörün her iki ucunda bulunur.	İlaçları şırıngadan şırıngaya aktarmak için.	50/600

*25'li çoklu ambalaj

Elastomerik pompa, 2 paket mevcut

	Marka adı	Kod	Ürün	Tanım	Endikasyon	Miktar kutu/koli
Seçenek 1	qimo prime , qimo ♂ & qimo ♀	7210.04		QimoPrime, Qimo Erkek ve Qimo Dişi ile aynı ambalajda.	Elastomerik pompanın doldurma portunu ve hattının distal ucunu sabitlemek için kullanılabilir, ancak başka uygulamalar da mümkündür.	50/600
Seçenek 2	qimo ♀	7210.02		Qimo Dişi, tekli ambalajlarda tedarik edilen çok amaçlı, kapalı, iğnesiz ve dezenfekte edilebilir bir güvenlik konektörüdür.	Qimo Dişi, Qimo Erkek ile sabitlenmiş elastomerik pompanın distal ucunun hatlarını bağlamak için, implante edilebilir bir porta veya başka herhangi bir hasta vasküler cihaza erişmek için kullanılabilir.	50/1200
	qimo prime & qimo ♂	7210.01		Aynı ambalajda Qimo Erkek ve QimoPrime ile birlikte verilen set.	Elastomerik pompa hattının distal ucunu sabitlemek için kullanılabilir. Qimo Di'i'ye bağlanması gerekiyor.	50/600

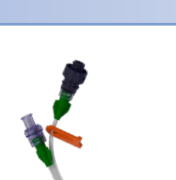
İlaçlar/çözeltiler için transfer cihazları

Torba

Marka adı	Kod	Ürün	Tanım	Endikasyon	Miktar kutu/koli
qimoconnect	7221.01 7221.020*		Qimo Dişi takılı bir lateral enjeksiyon bölgesi olan IV sıvı torbası uzatması. Qimo Erkek, uzatma tüpünün distal ucunu sabitler.	Her türlü ilacın seyreltilmesi ve uygulanması	25/150 10/60
qimoconnect filter	7221.011 7221.0110*		0.2 µm filtre ve Qimo Dişi ile donatılmış bir lateral enjeksiyon bölgesi içeren IV sıvı torbası uzantısı. Qimo Erkek, uzatma tüpünün distal ucunu sabitler.	Süzülmesi gereken çözeltilerin seyreltilmesi ve uygulanması (örn: Paklitaksel).	25/150 10/60
qimoconnect air filter	7221.012 7221.0120*		Havalandırma filtresi ve Qimo Dişi ile donatılmış bir yanıl enjeksiyon bölgesi bulunan IV sıvı torbası uzatması. Qimo Erkek, uzatma tüpünün distal ucunu sabitler.	Hava kabarcıklarının maksimum hacmini gidermek için köpürme çözeltilerinin seyreltilmesi ve hazırlanması (örn: Docetaxel).	25/150 10/60

* 10'lu çoklu ambalaj (Qimo Erkek hariç)

Jenerik ürünler

Marka adı	Kod	Ürün	Tanım	Endikasyon	Miktar kutu/koli
qimopump	7227.101 7227.201 7227.401		QimoPump, pompa infüzyon setleri için güvenli bir adaptördür. Bu cihaz 1, 2 veya 4 Qimo Dişi konnektör; hava tahliye portlu bir spike (kapaklı) ve özel pompalara bağlanmak için evrensel bir tüp ile donatılmıştır.	Özellikli pompa infüzyon setlerini sabitlemek ve ilaç içeren torbayı güvenli bir şekilde bağlamak.	25/150
qimo IVset integral ile qimoOctopus	7229.101 7229.201 7229.401		Spoke ve damla hazneli intravenöz infüzyon cihazı. Qimo IVset'in distal ucundaki erkek Luer-lock portuna takmak için 1, 2 veya 4 Qimo Erkek ve Qimo Erkek bulunur. QimoPrime, Qimo Male bağlandıktan sonra hattın hazırlanmasını sağlar.	Yerçekimiyile veya Qimono İnfüzyon Pompası (QIP) ile ilaçları güvenli şekilde infüze etmek.	25/150
qimo IVset haric qimoOctopus	7229.102 7229.202 7229.402				
qimconnect ♀	7221.02		Qimo Dişi ve bir havalandırma deliği (kapaklı) ile donatılmış bir lateral enjeksiyon alanına sahip IV sıvı torbası uzatma tüpü.	Toksik olmayan ilaçların hazırlanması ve uygulanması (antiemetikler, kortikoidler vb. premedikasyon)	25/150
qimoprime & qimo ♂	7210.01		Aynı ambalajda Qimo Erkek ve QimoPrime ile birlikte verilen set.	Hem erkek Luer-lock hem de dişi Luer-lock infüzyon cihazlarının ucunu sabitlemek için.	50/600
qimoOctopus	7231.221		QimoOctopus, sürekli infüzyon, aralıklı enjeksiyon ve kan örnekleme sağlayan güvenli bir çift lümenli IV uzatma tüpüdür. Yanal çizgisi Qimo Dişi ile donatılmıştır. Qimo Erkek, QimoOctopus'un distal ucuna takılmalıdır. QimoPrime, Qimo Erkek bağlandıktan sonra hattın hazırlanmasını sağlar.	Güvenli acil erişim. Hastaya yakın bir şırınga ile direkt enjeksiyon.	50/300

İnfüzyon setleri ve Qimono İnfüzyon pompası (QIP)

Marka adı	Kod	Ürün	Tanım	Endikasyon	Miktar kutu/koli
Yerçekimi veya peristaltik pompa için infüzyon seti					
qimo IVset integral ile qimo octopus	7229.101 7229.201 7229.401		Spike ve damla hazneli intravenöz infüzyon cihazı. Qimo IVset'in distal ucundaki erkek Luer-lock portuna takmak için 1, 2 veya 4 Qimo Dişi ve Qimo Erkek bulunur. QimoPrime, Qimo Erkek ile bağlandıktan sonra hattın hazırlanmasını sağlar.	Yerçekimiyle veya Qimono İnfüzyon Pompası (QIP) ile ilaçları güvenli şekilde infüze etmek için.	25/150
qimo IVset hariç qimo octopus	7229.102 7229.202 7229.402				
Aksesuar					
qimono infusion pump (QIP)	0VEPQIM FR 0VEPQIMG02 EN PLUG 0VEPQIMC03 NL 0VEPQIMC04 DE 0VEPQIMC06 ES 0VEPQIMC07 PT 0VEPQIMC08 IT 0VEPQIMC10 PL		İnfüzyon Pompası: Qimono infüzyon pompası (QIP) güvenli, kullanımı basit, kesin, sessizdir. 2 ayar modu mevcuttur: İnfüzyon hacmi ve zamanı veya Akış hızı ve infüzyon hacmi. Hemşire izleme ve hasta güvenliği için geniş renkli bir ekran, görsel + sesli kritik alarmlar görüntüler. Temizlemesi kolaydır ve Lityum bataryaya hızlı erişim sağlar. 2 yıl garanti (batarya hariç).	Qimono Infusion Pump, günlük bakım hastanesinde sitotoksik ilaçların ve perfüzyonun uygulanmasına adanmıştır. SADECE yukarıda listelenen Qimo IVset ile birlikte kullanılmak üzere.	1 birim/kutu

Hastanın vasküler erişimi

Marka adı	Kod	Ürün	Tanım	Endikasyon	Miktar kutu/koli
qimoperfusafe	7242.720 7242.725 7242.920 7242.925		QimoPerfusafe, implante edilebilir portlara erişmek için Qimo Dişi takılı Huber iğneli bir güvenlik infüzyon setidir.	İmlante edilebilir bir portu delmek için güvenli cihaz (korumalı iğne ve kapalı sistem konektörü).	10/90
qimo ♀	7210.02		Qimo Female, çok amaçlı, kapalı, iğnesiz ve dezenfekte edilebilir bir güvenlik konektörüdür.	Başka bir vasküler erişime bağlanmak için, Huber iğneleri, CVC ... güvenli ve kapalı bir sistem ile	50/1200
qimoflow+*	VPE741507 (22G – 15 mm) VPE741707 (22G – 17 mm) VPE742007 (22G – 20 mm) VPE742507 (22G – 25 mm) VPE743007 (22G – 30 mm) VPE743507 (22G – 35 mm) VPE741509 (20G – 15 mm) VPE741709 (20G – 17 mm) VPE742009 (20G – 20 mm) VPE742509 (20G – 25 mm) VPE743009 (20G – 30 mm) VPE743509 (20G – 35 mm) VPE741511 (19G – 15 mm) VPE741711 (19G – 17 mm) VPE742011 (19G – 20 mm) VPE742511 (19G – 25 mm) VPE743011 (19G – 30 mm) VPE743511 (19G – 35 mm)		Uzatma hatlı ve emniyet adaptörlü güvenli huber iğnesi: Qimo Dişi (kapalı sistem) QimoFlow +, çıkarma sırasında otomatik pozitif yıkama sağlayan tek elle etkinleştirme iğnesidir	Başka bir vasküler erişime bağlanmak için, Huber QimoFlow + safety Huber iğneleri, sıvıların implante edilebilir portlardan uygulanması veya çekilmesi için endikedir. İğneler, CVC ... güvenli bir şekilde ve kapalı bir sistemle.	12/30

* Lütfen yerel Vygon temsilcinizle görüşün.

Vesikal damlatma

Marka adı	Kod	Ürün	Tanım	Endikasyon	Miktar kutu/koli
qimo adapt	7210.06		QimoAdapt, bir tüpün hunisinde bir şırınga bağlantısı için güvenli bir adaptördür. Qimo Dişi, Qimo Erkek ile sabitlenmiş bir şırınga bağlamanıza izin verir.	Güvenli kese kullanımı	50/600

Yıkama cihazı

Marka adı	Kod	Ürün	Tanım	Endikasyon	Miktar kutu/koli
qimo prime	7210.81		QimoPrime, Qimo Erkek ile donatılmış herhangi bir ürüne bağlanabilen bir yıkama cihazıdır.	Qimo Erkek için yıkama cihazı	50/1200

Premedikasyon uzatma hattı

Marka adı	Kod	Ürün	Tanım	Endikasyon	Miktar kutu/koli
tüp set	855.02		Tüp seti, havalandırılmış başlıklı bir uzatma borusudur ve geri dönüşsüz bir vana ve bir doldurma kapağına sahip bir erkek Luer-lock konektördür.	İlaç uygulaması için uzatma hattı	25/150

[illegible]



 Notlar

[illegible]

[illegible]

İNTRAVASKÜLER TERAPİLER

Daha detaylı bilgi için: bilgi@vygon.com

Bu broşürde gösterilen özellikler sadece bilgi amaçlıdır.
ve hiçbir koşulda sözleşme niteliğinde değildir.

Vyon Türkiye Gazi mahallesi, Polatlı caddesi No:71 Ankara
Telefon: 0312.215.70.07 Faks: 0312.215.80.08

Vygon - 5, Adeline - 95440 ECOUEN - FRANSA
Telefon: +33 (0)1.39.92.63.63 - Fransa için Müşteri Hizmetleri: +33 (0)1.39.92.63.81
İhrac için Müşteri Hizmetleri: +33 (0)1.39.92.64.15 Faks.: +33 (0)1.39.92.64.44 - www.vygon.com