



ENTERAL
Enteral beslenme pompa ve aksesuarları



easy**lit** & easymoov**6**

Enteral beslenme pompaları

Kullanımı ve kurulumu kolay Easylit & Easymoov6 enteral besleme pompaları sezgiseldir, hastane ve evde bakımdaki sabit ve ayaktan ihtiyaçlara uyarlanmıştır.

easylit

Sabit kullanım için tasarlanmış
basit bir pompa

easymoov6

Ayakta kullanım için tasarlanmış,
sezgisel bir pompa

Sezgisel

Kısa öğrenme eğrisi

Güçlü

Sürekli döner peristaltik rotor, yüksek viskoziteli yiyeceklerin iletilmesine yardımcı olur

Sessiz

Sürekli döner peristaltik rotor, pompaların sessiz olmasını sağlar. Bu özellikle gece beslenmesi için çok önemlidir.

Temizlemesi kolay

Pompaların yuvarlak şekilleri kolay dekontaminasyon sağlar



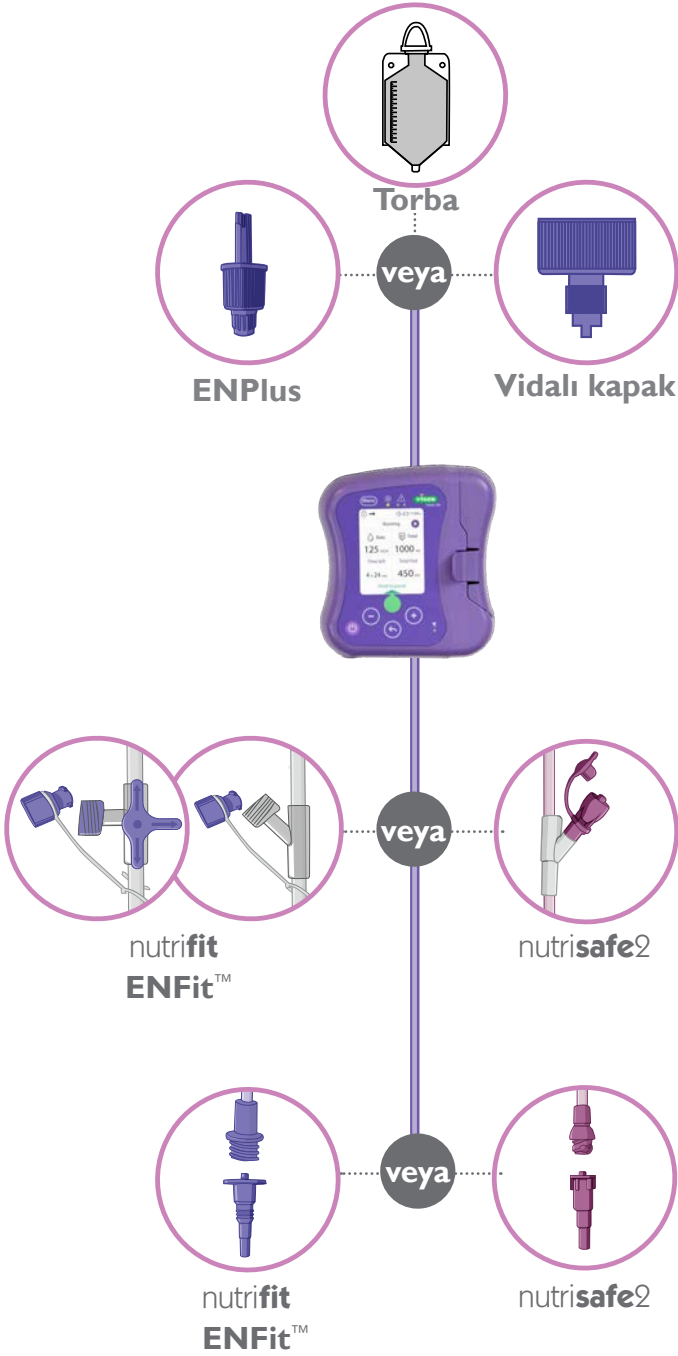
- Ağırlık: 1400 g
- Çalışma süresi: 7 saatte 125 ml/saat
- Doğruluk: 10%
- Akış hızı aralığı: 1 ila 600 ml/saat
- Hacim aralığı: 1 ila 9.999 ml
- Otomatik prime: 1 dk 35 sn
- Hafıza: 24 saat
- Görsel ve sesli alarmlar
- Entegre askı klembi

- Ağırlık: 650 g
- Çalışma süresi: 20 saatte 125 ml/saat
- Doğruluk 5%
- Akış hızı aralığı: 1 ila 400 ml / saat
- Hacim aralığı: 1 ila 9.999 ml
- Otomatik prime: 1 dakika 45 saniye
- Hafıza: 24 saat
- Görsel ve sesli alarmla
- Birden çok dil mevcuttur

Referans	Tanımlama	Miktar
0VEPL4Xxx ⁽¹⁾	EasyLit4 sabit pompa: programlanabilir akış hızı	1
0VEPL6Xxx ⁽¹⁾	EasyLit6 sabit pompa: programlanabilir akış ve hacim	
0VEPM6Xxx ⁽¹⁾	Easymoov6 ayaktan pompa: programlanabilir akış hızı ve hacmi, beslenme modu	

⁽¹⁾ Xxx : fi ve dil sürümünü belirtmek gereklidir

Beslenme setleri



Proksimal bağlantı

ENPlus bağlantısı, parenteral solüsyon torbalarıyla yanlış bağlantı riskini azaltır.

Enteral beslenme torbaları 500 ml, 1200 ml ve 1500 ml olarak mevcuttur.

Vidalı kapak bağlantısı, şişelere doğrudan bağlantı sağlar.

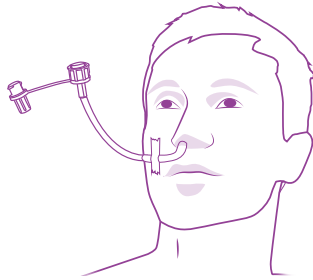
Yanal bağlantı

Güvenli ENFit bağlantısı veya Vygon'un güvenli sistemi nutrisafe2 ile beslenme setlerinin yanal bağlantısı mevcuttur.⁽²⁾

Distal bağlantı

Beslenme setlerinin distal bağlantısı, güvenli ENFit™ bağlantısı veya Vygon'un güvenli sistemi nutrisafe2 ile mevcuttur.⁽²⁾





Beslenme setleri, distal bağlantı için vidalanmış çam ağacı konektörü ile teslim edilir.




⁽²⁾ Vygon, pediatrik ve yetişkin kullanımı için nutrifit (ENFit) ve neonatal kullanım için nutrisafe2 önerir.



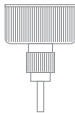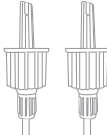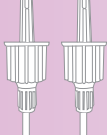
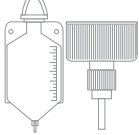
Distal bağlantı: ENFit & çam ağacı

Pompa Proksimal bağlantı	easy ^{lit} (3)		easy ^{moov} 6	
	Referans	Yanal bağlantı	Referans	Yanal bağlantı
	0VENEJ34S	ENFit	0VENEJ14S	ENFit
			0VENEJ08S valfli	ENFit
			0VENEJ14R	3-yollu musluk
			0VENEJ11S	-
	0VENEJ34SCS	ENFit	0VENEJ14SCS	ENFit
			0VENEJ14RCS	3-yollu musluk
			0VENEJ11SCS	-
	0VENP2GBJ34S 1200 ml	ENFit	0VENP1P14S 500 ml	ENFit
			0VENP2P14S 1200 ml	ENFit
	0VENEJ24S	ENFit	0VENEJ14S	ENFit
	0VENEJ24SH	ENFit	0VENEJ14SH	ENFit
	0VENEP24SHCS 1200 ml	ENFit	0VENEP2P14SHCS 1200 ml	ENFit
	-	ENFit	0VEN2P2P14SH 1200 ml x 2	ENFit

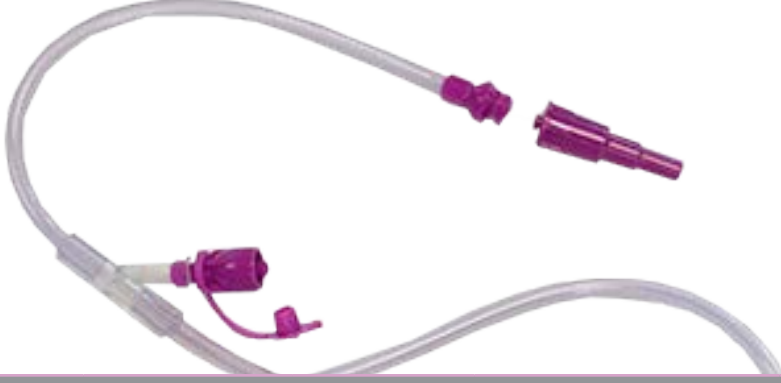(3) Easylit beslenme setleri ayrıca şu pompalarla da uyumludur: Jumbo, Nestlé P7000, Compat Standard, Flocare 800.



Distal bağlantı: nutrisafe2 & çam ağacı

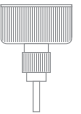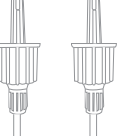Pompa	easy lit ⁽³⁾		easy moov 6	
	Referans	Yanal bağlantı	Referans	Yanal bağlantı
	0VENEJ34V	nutri safe 2	0VENEP14V	nutri safe 2
			0VENEP08V valfli	
	0VENEJ34VCS	nutri safe 2	0VENEP14VCS	nutri safe 2
	0VENP1GBJ34V 500 ml	nutri safe 2	0VENP1P14S 500 ml	nutri safe 2
	0VENP2GBJ34V 1200 ml			
	0VENEJ24V	nutri safe 2	-	-

Torbalar

Tüm torbalar aşağıdakilerle donatılmıştır:

- ENPlus ile uyumlu bir bağlantı
- Enteral formülü soğutmak için bir buz bölmesi
- Hasta ve formül bilgilerinin yazılmasını sağlayan şeffaf bir ön taraf.

Referans	Tanımlama	Miktar
0VENP1GT	500 ml torba	50
0VENP2GT	1200 ml torba	
0VENP3GT	1500 ml torba	



Beslenme seti aksesuarları

Klinik ihtiyaçlara göre enteral beslenme setlerini özelleştirmek için geniş bir aksesuar yelpazesi mevcuttur.



Referans	Tanımlama	Miktar
0VEACC015	Universal torba adaptörü	300
0VEACC023	Klemp	50
0VEACC126	Hidrasyon hattı ve ENPlus spike adaptörü ile üst çift hat adaptörü	100
0VEACC127	ENPlus spike adaptörlü üst çift hat adaptörü	100
0VEACC406	ENFit / çam ağacı adaptörü	50
0VEACC416	ENFit / kapaklı çam ağacı adaptörü	50
0VEACC500	ENFit / huni adaptör	50
0VEACC510	ENFit / nutrisafe2 adaptör	50
368.72	nutrisafe2 / ENFit adaptör	100
368.12	Nutrisafe2 erkek bağlantılı konik konektör	30
368.02	Nutrisafe2 /besleme seti adaptörü	30
829.01	Nutrisafe2 beslenme tüpleri için kapak	100

Pompa aksesuarları



Referans	Tanımlama	Miktar
0VEPM6BAG	Easymoov6 sırt çantası	1
0VESUPPOMP	Easymoov6 pompa masa tutucusu	1
1MWPM6CHA ⁽⁴⁾	Easymoov6 AC adaptör	1
1MWPM6ACP	Easymoov6 askı klemp	1
1MWPLCHA02 ⁽⁴⁾	EasyLit AC adaptör	1

⁽⁴⁾ : fi li versiyonu belirtmek gereklidir.

OBSTETRİK NEONATOLOJİ ENTERAL

Daha fazla bilgi için: bilgi@vygon.com

Bu broşürde gösterilen özellikler yalnızca bilgi amaçlıdır ve hiçbir koşulda sözleşme niteliği taşımaz.

Vygon - 5, rue Adeline - 95440 ECOUEN - FRANSA
Resepsiyon: +33 (0)1.39.92.63.63 - Müşteri ilişkileri Fransa: +33 (0)1.39.92.63.81
Müşteri ilişkileri Uluslararası : +33 (0)1.39.92.64.15
Faks.: +33 (0)1.39.92.64.44 - www.vygon.com
Vygon Türkiye Gazi mahallesi Polatlı caddesi No:71 Ankara
Resepsiyon: 0312.215.70.07 Faks: 0312.215.80.08



www.vygon.com