

NEONATOLOJİ
Enteral beslenme



nutrisafe²

Neonatoloji için güvenli
enteral beslenme
sistemleri

Uyumlu
ISO 80369-1

VYGON
Value Life

ISO standartları

ISO 80369-3 - Ek A - ENDİŞE


- "Ters bağlantı sistemi (dışiden erkeğe) kullanıldığında, yüksek riskli alt popülasyonlarda (ör. Yenidoğan hastalar) belirli klinik uygulamalarda doğru ilaç dozlarının verilmesinin olası riskleri hakkında endişeler ortaya çıkmıştır. Bu yönelim sıvının yanlışlıkla yer değiştirmesine neden olabilir ..."⁽¹⁾
- "Laboratuvar testi ayrıca dişi-erkek yöneliminde orta toleranslı bir E1 [ENFitTM] konektör çiftinin ortalama 0.148 ml yerine geçtiğini göstermektedir ..."⁽¹⁾

ISO 20695 - Ekler A & K - DÜŞÜK DOZ UÇLU ŞIRINGA (burada "alternatif enteral şiringa ucu" olarak adlandırılır)

- ISO komitesi "bu alternatif enteral şiringa ucu ile test sonuçları doz doğruluğu konusunda çelişkili sonuçlara yol açtığı için [bunu] yalnızca bilgi için önermeye karar verdi.
- "Bu alternatif enteral şiringa ucunun tasarımı, enteral şiringalar için doz doğruluğunun karşılanmasını sağlamayabilir; bu alternatif enteral şiringaya özel kullanıcı bilgileri ve eğitim eşlik etmelidir"⁽²⁾


Yenidoğan hastalar için mümkün olan en iyi bakımı ve güvenliğini sağlamak için Vygon, ISO 80369-1 ile uyumlu Nutrisafe2 sistemini sağlamaya devam edecek.

Neonatolojide GÜVENLİ, KÜÇÜK ve DOĞRU düşünün!

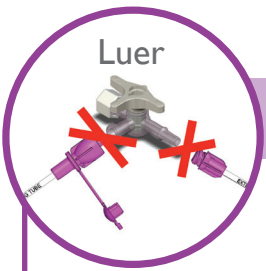

GÜVENLİ...


Yenidoğan hastalar için özel olarak tasarlanmış Nutrisafe2, ISO 80369-1 gerekliliklerine uygun olarak Luer ve diğer küçük çaplı konektörlerle uyumlu olmayan benzersiz bir güvenli enteral besleme sistemidir. Yanlış bağlantı riski en aza indirilir ve hasta güvenliği artar.

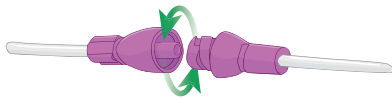

Kilitlenebilir sistem ek güvenlik sağlar. Yanlışlıkla bağlantının kesilmesi pratik olarak imkansızdır ve değerli besinlerin alınmasını sağlar.


(1) Extract of ISO 80369-3 : 2016

(2) Extract of ISO/DIS 20695.2:2018 (Revision of EN1615/EN1618)

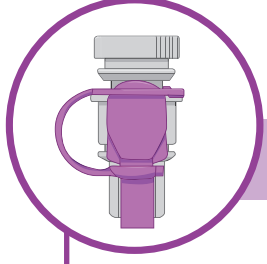

...KÜÇÜK...

Nutrisafe2'nin kompakt tasarımı sayesinde, konektörlerin boyutu, ağırlığı ve ölü alanı en aza indirilmiştir.

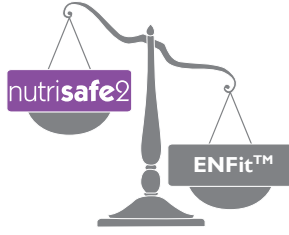

Tüpün yer değiştirmesi ve bükülme bu nedenle azaltılır.


Nutrisafe2®
ölü alanı
ENFit'e
kıyasla
% 70
azaltır⁽²⁾

...ve DOĞRU

Nutrisafe2 bağlantılarının kompakt tasarımı, özellikle morfin, digoksin, kafein sitrat, demir, metadon vb. gibi kritik ilaçlar için küçük hacimli ilaçların doğru şekilde verilmesini sağlar:

	nutrisafe2 (ISO 80369-1)	ENFit™ (ISO 80369-3)	Low Dose Tip (LDT)
Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği simülasyonu ile aşırı doz riski (3; 4)	0.029ml	0.120ml*	0.120ml

* ISO 80369-3: 2016'da, laboratuvar testlerinin yayınlanan sonuçları ENFit için 0,148 ml hacim deplasmanını göstermektedir.

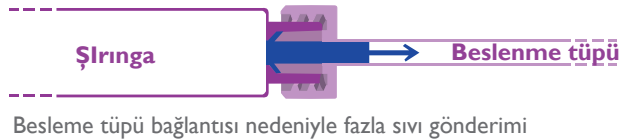

Besleme tüpü bağlantısı nedeniyle fazla sıvı gönderimi

www.safe-enteral.com

(3) Numerical measurements with Solidworks software - January 2014 - Internal data

(4) Study on the over-dosing risk of the « ENFit Low Dose Tip » syringe during its use, March 2018, Vygon & Andheo

Dünya çapında kanıtlanmış sistem

NEONATOLOJİDE 14 YILLIK TECRÜBE!

- 2005 yılında oluşturulan Nutrisafe2, Luer ile tamamen uyumsuz olan ve prematüre bebekler için özel olarak tasarlanmış ilk enteral beslenme sistemidir.
- Bildirilen yanlış bağlantı yok
- 30'dan fazla ülkeden memnun müşteriler

Yenidoğanlar için Komple Çözüm

Şırınga	0.5ml / 1ml / 2.5ml / 5ml / 10ml / 20ml / 35ml / 60 ml. Tek kullanımlık ve yeniden kullanılabilir Ayrıca UV için amber renkli şırıngalar mevcuttur koruma: 1ml / 2.5ml / 5ml / 10 ml
Beslenme tüpleri	Çeşitli uzunluk ve boyutlarda PVC, poliüretan ve silikon olarak mevcuttur.
Uzatma hatları	Çeşitli uzunluk ve boyutlarda mevcuttur.
Örnekleme pipetleri	Şırıngaları anne sütü, formül veya ilaçla doldurmak için farklı boyut ve tiplerde mevcuttur.
Aksesuarlar	Şırınga için havalandırmalı kapaklar Y konektörü Erkek-erkek konektör Örnekleme için oral ilaç şişesi kapakları ...
Şırınga pompası	Enteral beslenme için özel olarak tasarlanmıştır. Bu kullanımı kolay pompa, 6 saatten fazla sürekli çalışma kapasitesine sahiptir ve tüm Nutrisafe2 şırıngaları (A-VY, C-GON, V-PY) ile uyumludur.



OBSTETRICS NEONATOLOGY ENTERAL

Daha fazla bilgi için, lütfen: bilgi@vygon.com

Bu broşürde verilen özellikler sadece bilgi amaçlıdır ve hiçbir koşulda sözleşme niteliğinde değildir.

Vygon - 5, rue Adeline - 95440 ECOUEN - FRANSA

Resepsiyon: +33 (0)1.39.92.63.63 - Mü teri ili kileri Fransa: +33 (0)1.39.92.63.81

Yurtdışı mü teri ili kileri: +33 (0)1.39.92.64.15 Faks: +33 (0)1.39.92.64.44 - www.vygon.com

Vygon Türkiye Gazi mahallesi Polatlı caddesi No:71 Ankara -Türkiye Resepsiyon: 0312.215.70.07 Faks: 0312.215.80.08



www.vygon.com